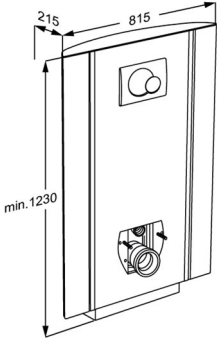




<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	SELECT TL2 Toilet-Lifter mit Seitenprofilen, für Wandablauf R8322000
<b>Farbe</b>	Wei
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>VVS:617995400 NRF:6191029 EAN:5708590341545 HMI: 105975</p>  <p>Es geht um die tgliche WC-Benutzung. Und darum, das Hinsetzen und Aufstehen so leicht wie mglich zu machen. Es geht darum, den Helfern die Arbeit zu erleichtern und den Benutzern einen bequemen und wrdvollen WC-Besuch zu ermglichen.</p> <p>SELECT TL2 WC-Lifter, um 400 mm elektrischen hhenverstellbar mit kabelgebundener Fernbedienung. Inkl. eingebauter Splkasten mit Doppelsplung 3/6 Liter. WC-Keramik und Toilettensitz mssen separat bestellt werden. Die eingebauten senkrechten Seitenprofile ermglichen Nachmontage von PLUS Sttzklappgriffen. Fr Wandablauf geeignet. Material: Aluminium eloxiert und Polystyrol (PS). Exkl. Wandbefestigungen.</p>
<b>Verstellung</b>	Hhenverstellbar
<b>Hhenverstellung</b>	400 mm
<b>Produktkapazitt</b>	<p>Maximales Anwendergewicht: 200 kg. Maximale Belastung: 235 kg (Anwender + Zubehr). Bei einer Belastung des WC-Lifters mit 235 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 94 kg belastet. <i>Der WC-Lifter wurde statisch mit einer Belastung von 600 kg, an der Montagestelle der Toilette, getestet. Dies entspricht den Anforderungen der geltenden Normen. Bitte beachten Sie, dass die meisten Toiletten, die am WC-Lifter montiert werden knnen, auf 400 kg getestet wurden.</i></p>
<b>Geschwindigkeit</b>	Geschwindigkeit aufwrts: 12 mm/s Geschwindigkeit abwrts: 12 mm/s
<b>Geruch</b>	48 dB





<b>Produkt</b>	SELECT TL2 Toilet-Lifter mit Seitenprofilen, für Wandablauf
<b>Produktnummer</b>	R8322000
<b>Materialien</b>	Eloxiertes Aluminium. Die Frontplatte bestehen aus einem Thermoplast Kunststoff (Polystyrol).>br>Abdeckplatte aus Kompaktlaminat mit Aluminium Dekor. <i>Entflammbarkeitsgeprüft (ISO 8191-1 und ISO 8191-2). Testbericht verfügbar.</i>
<b>Ergonomie</b>	Unsere WC-Lifter gibt es in drei verschiedenen Farben, die mit modernen Bädern harmonisieren und zu einem freundlichen, behaglichen Ambiente in Bad und WC beitragen. Abgerundete Ecken und Kanten machen das Reinigen einfach und schnell – keine verdeckten Falze oder Vertiefungen, in denen sich Schmutz sammeln kann.
<b>Funktionen</b>	Der WC-Lifter verfügt über eine kabelgebundene Fernbedienung, mit der Benutzer und Helfer leicht die Höhe verstellen können. Die Sitzhöhe ist um 400 mm verstellbar, von 425 bis 825 mm – auch während der Benutzer auf dem WC sitzt.
<b>Stromanschluss (V)</b>	230
<b>Motor</b>	LA31 Careline, (Linak), 4000N, IPX6
<b>Steuerkasten</b>	CB9 Careline, (Linak), IPX6
<b>Kabelgebundener Fernbedienung</b>	HB7, (Linak) IP66
<b>Stromverbrauch (max. Belastung)</b>	Stromverbrauch, maximal Belastung: 70 W Stromverbrauch, standby: 2 W
<b>Garantie</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.





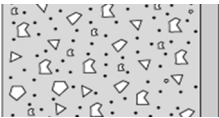
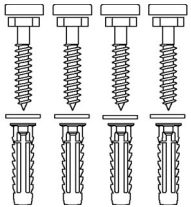

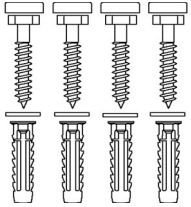
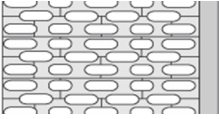
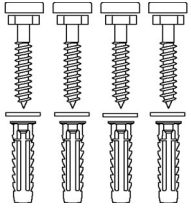
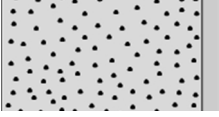
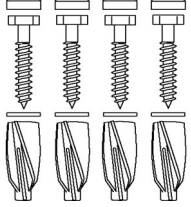
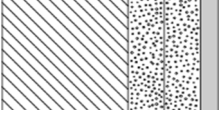
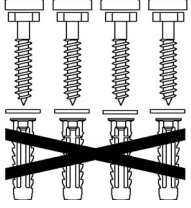
<b>Produkt</b>	SELECT TL2 Toilet-Lifter mit Seitenprofilen, für Wandablauf
<b>Produktnummer</b>	R8322000
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Lysoformin Spezial</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p><b>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE:</b> Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>
<b>Konformitäts- erklärung</b>	<p>Diese Produkt gemäß ist Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden. Diese Produkt erfüllt somit sämtliche Forderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EG.</p>





<b>Produkt</b>	SELECT TL2 Toilet-Lifter mit Seitenprofilen, für Wandablauf
<b>Produktnummer</b>	R8322000

## Montage in verschiedenen Wandtypen

	<b>Beton &gt;B25</b> V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Vollziegel &gt;= Mz12</b> V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Kalklochsandstein &gt;= Hlz12</b> V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Porenbeton P4</b> V8655 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14, mit graue Abdeckung. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung</b> V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit weisse Abdeckung. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	





# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	SELECT TL2 Toilet-Lifter mit Seitenprofilen, für Wandablauf R8322000	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten</b> Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</b> Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung</b> Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.	

Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®